

Zubehör

Kupferne, versilberte und vergoldete Elektroden



Präparate-Elektroden



Handgelenk-Elektroden



Elektroden-Kabel
(Klinken - Chinch)



Netzladegerät



Literaturempfehlung

Für die Nutzung des Solar-Zappers empfehlen wir die entsprechende Fachliteratur, insbesondere die Bücher von Dr. Hulda R. Clark:

Heilung ist möglich
ISBN 978-3426870181

Heilung aller fortgeschrittenen Krebsarten
ISBN 978-1890035242

Vorzüge von Solar-Zappern

- Leistungsstarke Power-Solarzelle
- 10-Volt-NiMH-Akku, daher kostengünstig, umweltfreundlich und wartungsfrei
- Vollgeladener Akku gewährt ca. 1 Monat Gangreserve, Modell 3.8 auch mit externem Ladegerät
- Akkutest auf Knopfdruck
- Automatische Abschaltung nach Zappvorgang
- Übersichtliche und einfache Bedienung
- Streng nach den Vorgaben von Dr. Clark entwickelt
- Automatischer Timer für alle Zyklen
- Auf Knopfdruck zeigen die Lämpchen den entsprechenden Zyklus an
- Ist ein Stecker in der Ladebuchse **3**, schaltet diese aus Sicherheitsgründen das Gerät auch dann aus, wenn der Geräteschalter **4** auf „Ein“ steht.

Obige Vorzüge werden seit Jahren von vielen Anwendern bestätigt. Die Schulmedizin hat inzwischen Viren, z. B. bei Gebärmutterhalskrebs, bestätigt und bietet entsprechende Impfstoffe dagegen an. Weiteres ist im Werden!

WÜRTH BIOPHYSIK

El. Ing. FH Theophil M. Würth
Am Berg 29
D-65618 Selters-Münster

Tel. +49 (0)6483 / 804 902
at@wuerth-biophysik.de
www.wuerth-biophysik.de


SOLAR-ZAPPER

nach Dr. Hulda R. Clark

Seit über 20 Jahren
tausende
zufriedene Kunden!



So wird gezappt:

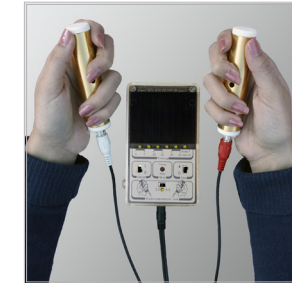

Handelektroden in die Handflächen nehmen:

rot rechts
weiß links


Zapper einschalten

Der Solarzapper kann:

- Ihre Wellness erheblich fördern
- Zellspannung und Energiehaushalt harmonisieren
- Das Immunsystem stärken
- Pilze, Viren und Bakterien eliminieren, welche die Ursachen sehr vieler Krankheiten sind
- Sehr kosteneffizient sein
- Aufputzmittel ersetzen, wie z.B. Kaffee
- Meditative Zustände begünstigen

Funktionen im Überblick

- 1 Daten und Informationen**
Daten sind auf der Rückseite aufgedruckt. Dazu gehören die Funktionsbeschreibung der Schalter, Tasten und Lämpchen, technische Daten sowie das CE-Zeichen.
- 2 Power-Solarzelle**
Die Solarzelle lädt den integrierten 10V-Akku in 2-3 Sonnentagen voll auf. Dies reicht für ca. 100 Zappanwendungen. Reservieren Sie dem Zapper demnach einen Sonnenplatz! Der Akku kann nicht überladen werden.
- 3 Buchse für Netzladegerät (Aufpreis)**
Bei starker Nutzung (z. B. in Praxen) und langen Perioden ohne Sonne (z. B. neblige Winterzeit).
- 4 Ein-/Ausschalter**
Am „Ende“ schaltet das Gerät auf „Sleep“, benötigt also nur noch wenig Strom.
- 5 Elektrodenstrom-Schalter**
Zwei verschiedene Stromstärken sind wählbar. Normal: 3,0 mA (entspricht ca. 7 Volt). Stark: 4,5 mA (entspricht ca. 10 Volt).
- 6 Elektrodenstrom-Anzeige**
Die Anzeige leuchtet nur dann, wenn der Stromkreis (während der Zappzyklen) via Elektroden und Anwender geschlossen ist.
- 7 Buchse für Elektroden-Kabel (Klinken-Chinch)**
- 8 Signalton-Schalter**
Der Signalton kann abgeschaltet werden, was unauffälliges Zappen in der Öffentlichkeit ermöglicht. Ebenso dienlich beim Zappen während Meditationen bzw. Schlafen.

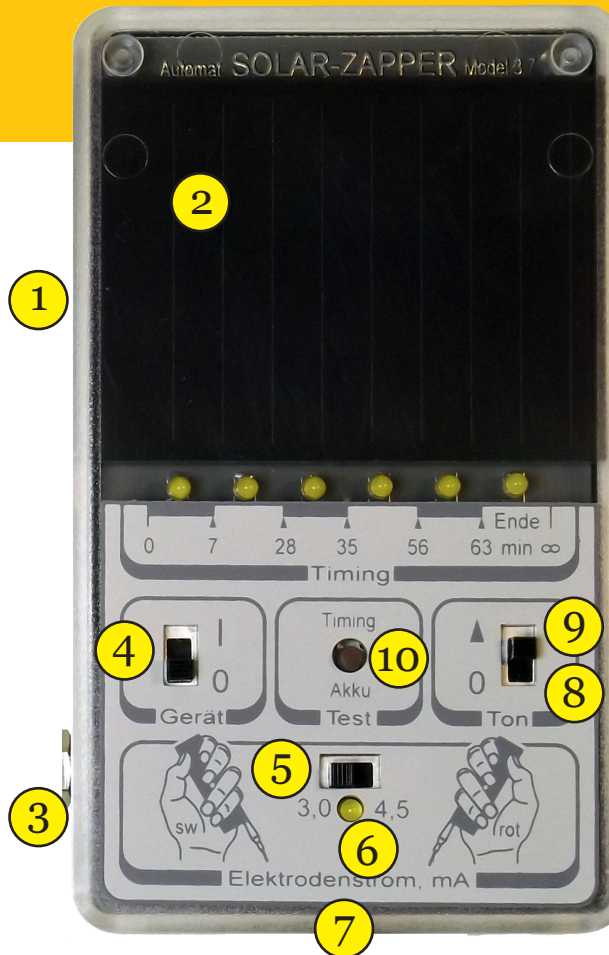

1:1 Abbildung: 73 mm Breite

- 9 Signalton**
Jeder Zappzyklus wird mit einem Signalton angekündigt (ausgenommen beim ersten) und abgeschlossen.
- 10 Automatischer Timer und Akkutest**
Der Zappvorgang, welcher aus 3 Zappzyklen zu je 7 Min. und 2 dazwischen liegenden Pausen von je 21 Min. (=63 Min.) besteht, läuft automatisch ab. Auf Tastendruck leuchtet dasjenige Lämpchen auf, das sich im zugehörigen Zyklus befindet. Jedoch nur dann, wenn der Akku genügend geladen ist (=Akkutest).

Spezial-Elektroden

Präparate-Elektroden



Aufschwinger:

Geben Sie ein Präparat, wie homöopathisches Mittel, Kristall, Mineral, Schüssler-salz, Bachblüten, Nosoden, Blut, Haare, Foto ... in das Fläschchen. Die Schwingung oben genannter Präparate wird dann den bioenergetischen Impulsen des Solarzappers aufmoduliert bzw. aufgeschwungen und erzeugt so eine zusätzliche, spezifische Heilwirkung.



Homöografische Kopien:

Sie können oben genannte Mittel auch „kopieren“, indem Sie in ein Fläschchen einen neutralen Träger (reines Wasser, Globuli, ...) und in das andere Fläschchen die zu kopierende Substanz geben. Zapper für 30 Sekunden einschalten. Fertig.

Handgelenk-Elektroden



1. Watte-Pad anlegen und mit Wasser einsprühen.
2. Silikon-Pad auflegen, rot rechts - weiß links
3. Mit Klettband fixieren und Zapper einschalten



Für Kinder, Tiere und alle, die viel in Bewegung sind oder schlafen, sind Handgelenk-Elektroden besonders praktisch! Allerdings sei darauf hingewiesen, dass „normale“ Elektroden deutlich wirkungsvoller sind, da unserer Auffassung nach über die Fingerspitzen eine optimale Wechselwirkung mit allen Meridianen unserer Energiesystems hergestellt wird.